


## Gaita örneğinin alındığı tarih

Lütfen gaita örneğinin alındığı tarihi belirtiniz ve bu notu da yükleme zarfına ekleyiniz!

## Gaita Örneği Alma Tüpü ile Dışkının Alınması

### Gaita Örneği Alma Tüpünün Tasarımı

Sıvı ile doldurulmuş gaita örneği tüpü

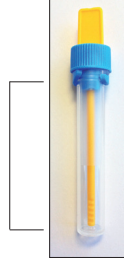

**SARI:** Kolayca kapanıp çıkarılabilen miktar çubuğu

**Mavi:** Konik yapıdaki mavi parça; sarı çubuktaki gereğinden fazla gaitanın dışarıda kalmasını sağlar

#### 1 Miktar çubuğunu çıkartınız

Gaita örnek alma tüpünün **üst tarafında bulunan sarı parçayı** çevirerek miktar çubuğunu çıkartınız. **Konik yapıdaki mavi parça tüpte sabit ve kilitli bir şekilde yer almalıdır, mavi parçayı çıkartmayınız!**

#### 2 Gaita örneğinin alınması

Miktar çubuğunu gaita örneğinin farklı bölgelerine **3-defa** batırınız. Miktar çubuğunun ucunda bulunan tırtıklı alan **tamamıyla gaita örneğiyle kaplanmış** olmalıdır.


#### 3 Miktar çubuğunun sadece bir kere örnek tüpüne yerleştirilmesi

Gaita örneği alınmış olan miktar çubuğunu örnek tüpünün içine bir kere yerleştirin ve **asla geri çıkarmayın**. Çubuktaki fazla gaita örneği, mavi kısmın konik yapısı sayesinde dışarıda kalacaktır. Lütfen not edin: Miktar çubuğunda sadece **küçük ve istenen miktar kadar** gaita örneği, örnek tüpünün içerisine girmektedir. Sarı olan parçayı sıkıca kapatınız ve kapanma esnasında parçanın tam kapandığına dair sesi duyacaksınız.

**Lütfen Not Edin:** Tüpün içindeki **gaita solüsyonu, normalde çok fazla renk değişimine uğramaz**. Eğer aynı çubukla birkaç defa çıkarıp örnek almaya kalkarsanız, bu durumda gereğinden fazla örnek miktarı almış olacaksınız ve tüpün içindeki solüsyonun rengi çok fazla değişmektedir. Bunun sonucunda da örnek, ya **ölçülemeyecek duruma gelecektir** yada **yalancı pozitiflik durumu ortaya çıkacak ve yanlış bir şekilde raporlanacaktır**.

#### 4 Gaita örneğinin alınıp tüpe konulması

1-3 noktalarında bahsedildiği gibi, örnek alındıktan sonra, örnek çubuğunun aynı günde yada en geç ertesi günde tüpe konulması gerektiğine dair ilgili doktoru veya kliniği bilgilendiriniz.

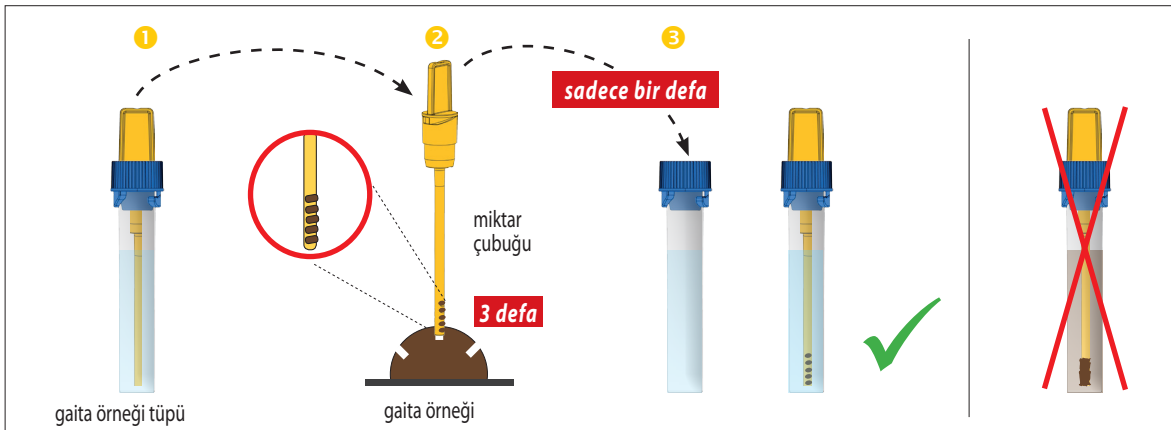

**Immundiagnostik AG**  
Stubenwald-Allee 8a  
64625 Bensheim, Germany  
Phone: +49 (0) 62 51/70 19 00  
Fax: +49 (0) 62 51/84 94 30  
info@immundiagnostik.com  
www.immundiagnostik.com



Barcode